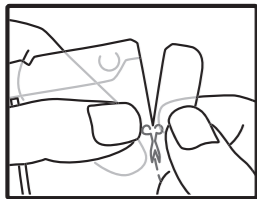


en**INSTRUCTIONS FOR USE****EASY STORE**
BREAST MILK STORAGE BAG

Package contents: 25 x Easy Store bags, Instructions for Use

Purpose:

The Easy Store breast milk storage bag is suitable for safe and compact storage and for easy heating of breast milk.

Important Information:

- The breast milk storage bag must be used once only.
- Thawed breast milk must not be refrozen.

Filling bag with breast milk:

1. Wash your hands thoroughly with soap and water and dry them before using the bag.
2. Label the green fields on the bag with a waterproof marking pen (name, date and time).
3. Cut the top end of the bag along the dotted line and open the zip closure.
4. Fill with breast milk to the 180 ml / 6 fl oz mark.
5. Press the air out and close the zip closure.

Storage of breast milk:

- At room temperature: 3 to 4 hours is optimal; 6 to 8 hours under very clean conditions at 16–29 °C (60–85 °F)
- In the refrigerator: 72 hours is optimal; 5 to 8 days under very clean conditions at approx. 4 °C (39 °F)
- In the freezer: 6 months is optimal; 12 months is acceptable at <–17 °C (0 °F)

Heating breast milk:

- The bag is not suitable for thawing and heating in a microwave oven.
- Thaw breast milk gently in a warm water bath or in the refrigerator.
- Heat the bag in a warm water bath and feed the breast milk as soon it reaches body temperature.


Materials: LDPE / PET

Disposal: As per local regulations

Food-safe

Disposable article

Not suitable for microwaves

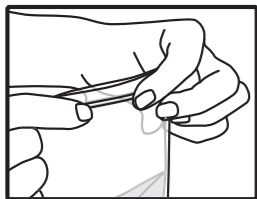**de****GEBRAUCHSANWEISUNG****EASY STORE**
MUTTERMILCHBEUTEL

Packinginhalt: 25 x Easy Store Beutel, Gebrauchsanweisung

Verwendungszweck:

Der Easy Store Muttermilchbeutel ist geeignet für die sichere und platzsparende Aufbewahrung sowie für das einfache Erwärmen von Muttermilch.

Wichtige Hinweise:

- Der Muttermilchbeutel darf nur einmal verwendet werden.
- Aufgetaute Muttermilch darf nicht wieder eingefroren werden.

Einfüllen von Muttermilch:

1. Waschen Sie sich vor dem Gebrauch des Beutels gründlich die Hände mit Wasser und Seife und trocken Sie diese ab.
2. Beschriften Sie die grünen Felder des Beutels mit einem wasserfesten Stift (Name, Datum und Zeit).
3. Trennen Sie das obere Ende des Beutels entlang der gestrichelten Linie ab und öffnen Sie den Zipverschluss.
4. Füllen Sie die Muttermilch max. bis zur Markierung 180 ml / 6 fl oz ein.
5. Pressen Sie die Luft heraus und schliessen Sie den Zipverschluss.

Aufbewahren von Muttermilch:

- Bei Zimmertemperatur: 3 bis 4 Stunden optimal; 6 bis 8 Stunden unter sehr sauberen Bedingungen bei 16–29 °C (60–85 °F)
- Im Kühlschrank: 72 Stunden optimal; 5 bis 8 Tage unter sehr sauberen Bedingungen bei ca. 4 °C (39 °F)
- Im Gefrierschrank: 6 Monate optimal; 12 Monate akzeptabel bei <–17 °C (0 °F)

Erwärmen von Muttermilch:

- Der Beutel ist nicht geeignet für das Auftauen und Erwärmen in der Mikrowelle.
- Tauen Sie die Muttermilch schonend in einem Wasserbad oder im Kühlschrank auf.
- Erwärmen Sie den Beutel in einem warmen Wasserbad und verabreichen Sie die Muttermilch, sobald diese Körpertemperatur erreicht hat.

Materialien: LDPE / PET

Entsorgung: Bedenkenlos gemäss lokalen Vorschriften

Lebensmittelrecht

Einwegartikel

Nicht für Mikrowellen geeignet

de**MODE D'EMPLOI****EASY STORE**
SACHET POUR LAIT MATERNEL

Contenu par emballage : 25 x sachets Easy Store, mode d'emploi

Usage prévu :

Le sachet Easy Store permet un stockage en toute sécurité et peu encombrant ainsi que le réchauffement simple du lait maternel.

Remarques importantes :

- Le sachet pour lait maternel est à usage unique.
- Le lait maternel décongelé ne doit plus être congelé.

Verser le lait maternel dans le sachet :

1. Avant d'utiliser le sachet, lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon et séchez-les.
2. Complétez les champs en vert du sachet avec un feutre indélébile (nom, date et heure).
3. Retirez la partie supérieure du sachet le long de la ligne en pointillés et ouvrez la fermeture zippée.
4. Versez le lait maternel sans dépasser le repère 180 ml / 6 fl oz.
5. Évacuez l'air et fermez le zip.

Conservation du lait maternel :

- À température ambiante : conservation optimale 3 à 4 heures ; 6 à 8 heures dans d'excellentes conditions d'hygiène à 16–29 °C (60–85 °F)
- Au réfrigérateur : conservation optimale 72 heures ; 5 à 8 jours dans d'excellentes conditions d'hygiène à env. 4 °C (39 °F)
- Au congélateur : conservation optimale 6 mois ; acceptable 12 mois à <–17 °C (0 °F)

Réchauffement du lait maternel :

- Le sachet n'est pas conçu pour la décongélation et le réchauffement au micro-ondes.
- Décongelez doucement le lait maternel au bain-marie ou au réfrigérateur.
- Réchauffez le sachet dans un bain-marie chaud et donnez le lait maternel dès qu'il est à température corporelle.

Matériaux : LDPE / PET

Élimination : Sans risque selon la réglementation locale

Qualité alimentaire

Article jetable

Non conçu pour un usage au micro-ondes

fr**ISTRUZIONI PER L'USO****EASY STORE**
SACCA PER LATTE MATERNO

Contenuto della confezione: 25 sacche Easy Store, istruzioni per l'uso

Usò previsto:

La sacca per latte materno Easy Store è indicata per conservare il latte materno in modo sicuro e risparmiando spazio, nonché per il suo facile riscaldamento.

Importanti avvertenze:

- La sacca per latte materno è monouso.
- Il latte materno scongelato non deve essere ricongelato.

Riempimento con latte materno:

1. Prima di utilizzare la sacca, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e asciugarle.
2. Riportare il nome, la data e l'ora nei campi verdi della sacca utilizzando una matita resistente all'acqua.
3. Strappare la parte superiore della sacca lungo la linea tratteggiata e aprire la chiusura a cerniera.
4. Versare il latte materno al massimo fino alla marcatura di 180 ml / 6 fl oz.
5. Fare uscire l'aria premendo sulla sacca, quindi chiudere con la chiusura cerniera.

Conservazione del latte materno:

- A temperatura ambiente: ottimale da 3 a 4 ore; da 6 a 8 ore in condizioni di assoluta pulizia alla temperatura compresa tra 16 e 29 °C (60–85 °F)
- In frigorifero: ottimale 72 ore; da 5 a 8 giorni in condizioni di assoluta pulizia a 4 °C (39 °F)
- In congelatore: ottimale 6 mesi; accettabile 12 mesi a <–17 °C (0 °F)

Riscaldamento del latte materno:

- La sacca non è idonea allo scongelamento e al riscaldamento nel forno a microonde.
- Scongelare in modo delicato il latte materno mettendo la sacca in frigorifero o immergendola nell'acqua.
- Riscaldare la sacca immergendola in acqua calda e utilizzare il latte materno non appena questo ha raggiunto la temperatura corporea.

Materiali: LDPE / PET

Smaltimento: In modo sicuro nel rispetto delle normative locali

Per uso alimentare

Articolo monouso

Non idoneo a forni a microonde

it**INSTRUCCIONES DE USO****EASY STORE**
BOLSA PARA LECHE MATERNA

Contenido del envase: 25 bolsas de congelación Easy Store, instrucciones de uso

Usò previsto:

La bolsa para leche materna Easy Store es apta para almacenar de forma segura ahorrando espacio y calentar fácilmente la leche materna.

Advertencias importantes:

- La bolsa de leche materna solo se puede utilizar una sola vez.
- No se puede volver a congelar la leche materna descongelada.

Llenado con leche materna:

1. Lávese bien las manos con agua y jabón y séquelas antes del uso de la bolsa.
2. Rellene los campos verdes de la bolsa con un rotulador resistente al agua (nombre, fecha y hora).
3. Separe el borde superior de la bolsa a lo largo de la línea de puntos y abra el cierre zip.
4. Rellénela con la leche materna como máx. hasta la marca 180 ml / 6 fl oz.
5. Presione para extraer el aire y cierre el zip.

Conservación de la leche materna:

- A temperatura ambiente: de 3 a 4 horas óptima; de 6 a 8 horas en condiciones muy higiénicas a 16–29 °C (60–85 °F)
- En el frigorífico: 72 horas óptima; 5 a 8 días en condiciones muy higiénicas a aprox. 4 °C (39 °F)
- En el congelador: 6 meses óptima; 12 meses aceptable a <–17 °C (0 °F)

Calentamiento de la leche materna:

- La bolsa no es apta para la descongelación y calentamiento en el microondas.
- Descongele la leche materna con cuidado al baño María o en el frigorífico.
- Caliente la bolsa al baño María y administre la leche materna tan pronto haya alcanzado la temperatura corporal.

Materiales: LDPE / PET

Eliminación: sin reservas según las normas locales

Apto para alimentos

Producto desechable

No apto para microondas

es**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO****EASY STORE**
SACO DE LEITE MATERNO

Conteúdo da embalagem: 25 sacos Easy Store, instruções de utilização

Utilização prevista:

O saco de leite materno Easy Store é indicado para guardar o leite materno de forma segura e em pouco espaço, bem como para o seu fácil aquecimento.

Indicações importantes:

- O saco de leite materno só pode ser usado uma vez.
- Uma vez descongelado, o leite materno não pode voltar a ser congelado.

Enchimento com leite materno:

1. Antes de usar o saco, lave bem as mãos com água e sabão e seque-as.
2. Use uma caneta à prova de água para escrever nos campos verdes do saco (nome, data e hora).
3. Separe a margem superior do saco ao longo da linha tracejada e abra o fecho zip.
4. Encha com leite materno sem ultrapassar a marcação de 180 ml / 6 fl oz.
5. Aperte o saco para fazer sair o ar e feche o fecho zip.

Guardar o leite materno:

- A temperatura ambiente: 3 a 4 horas, de preferência; 6 a 8 horas em condições extremamente higiénicas a 16–29 °C (60–85 °F)
- No frigorífico: 72 horas, de preferência; 5 a 8 dias em condições extremamente higiénicas a cerca de 4 °C (39 °F)
- No congelador: 6 meses, de preferência; 12 meses são aceitáveis a <–17 °C (0 °F)

Aquecer o leite materno:

- O saco não é indicado para o descongelamento e o aquecimento no micro-ondas.
- Descongele o leite materno cuidadosamente em banho-maria ou no frigorífico.
- Aqueça o saco em banho-maria e dê o leite materno assim que este alcançar a temperatura corporal.

Materiais: PEBD / PET

Eliminação: de acordo com os regulamentos locais

próprio para alimentos

Artigo descartável

Impróprio para micro-ondas

pt**GEBUIKSAANWIJZING****EASY STORE**
MOEDERMELK BEWAARZAKJE

Verpakkinginhoud: 25x Easy Store zakje, gebruiksaanwijzing

Beoogd gebruik:

Het Easy Store moedermelk bewaarzakje is geschikt voor veilige en ruimtebesparende opslag en voor eenvoudige opwarming van moedermelk.

Belangrijke aanwijzingen:

- Het moedermelk bewaarzakje mag slechts eenmaal worden gebruikt.
- Ontdooide moedermelk mag niet opnieuw worden ingevroren.

Vullen met moedermelk:

1. Vóór gebruik van het bewaarzakje de handen grondig met water en zeep wassen en afdrogen.
2. Noteer gegevens op de groene velden van het zakje met een watervast stift (naam, datum en tijd).
3. Verwijder het bovenste uiteinde van het bewaarzakje langs de stippellijn en open de ritsluiting.
4. Vul het bewaarzakje niet verder met moedermelk dan de markering van 180 ml (6 fl oz).
5. Druk de resterende lucht uit het bewaarzakje en sluit de ritsluiting.

Opslaan van moedermelk:

- Bij kamertemperatuur: 3 tot 4 uur optimaal; 6 tot 8 uur onder zeer schone omstandigheden bij 16–29 °C (60–85 °F)
- In de koelkast: 72 uur optimaal; 5 tot 8 dagen onder zeer schone omstandigheden bij ca. 4 °C (39 °F)
- In de vriezer: 6 maanden optimaal; 12 maanden acceptabel bij <–17 °C (0 °F)

Opwarmen van moedermelk:

- Het bewaarzakje is niet geschikt voor ontdooien en opwarmen in de magnetron.
- Ontdooi de moedermelk met zorg in een waterbad of in de koelkast.
- Warm het bewaarzakje op in een warmwaterbad en gebruik de moedermelk zodra deze op lichaamstemperatuur is.

Materialen: LDPE / PET

Afvalverwijdering: Eenvoudig volgens de lokale regelgeving

Geschikt voor levensmiddelen

Product voor eenmalig gebruik

Niet geschikt voor magnetron

nl