


Chirurgische Absaugung



Chirurgiesauger ARDO Master & Senator

Zuverlässig, saugstark und leise

Die chirurgischen Absauggeräte von ARDO überzeugen seit rund 20 Jahren durch ihre zuverlässige und **hohe Saugleistung** bei zugleich **flüsterleisem Betrieb**, den **schnellen Vakuumaufbau**, ihre **hohe Sicherheit** sowie ihre **Langlebigkeit**. Die einfach zu bedienenden Geräte eignen sich für den langjährigen Einsatz in Kliniken, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und in der Veterinärmedizin.

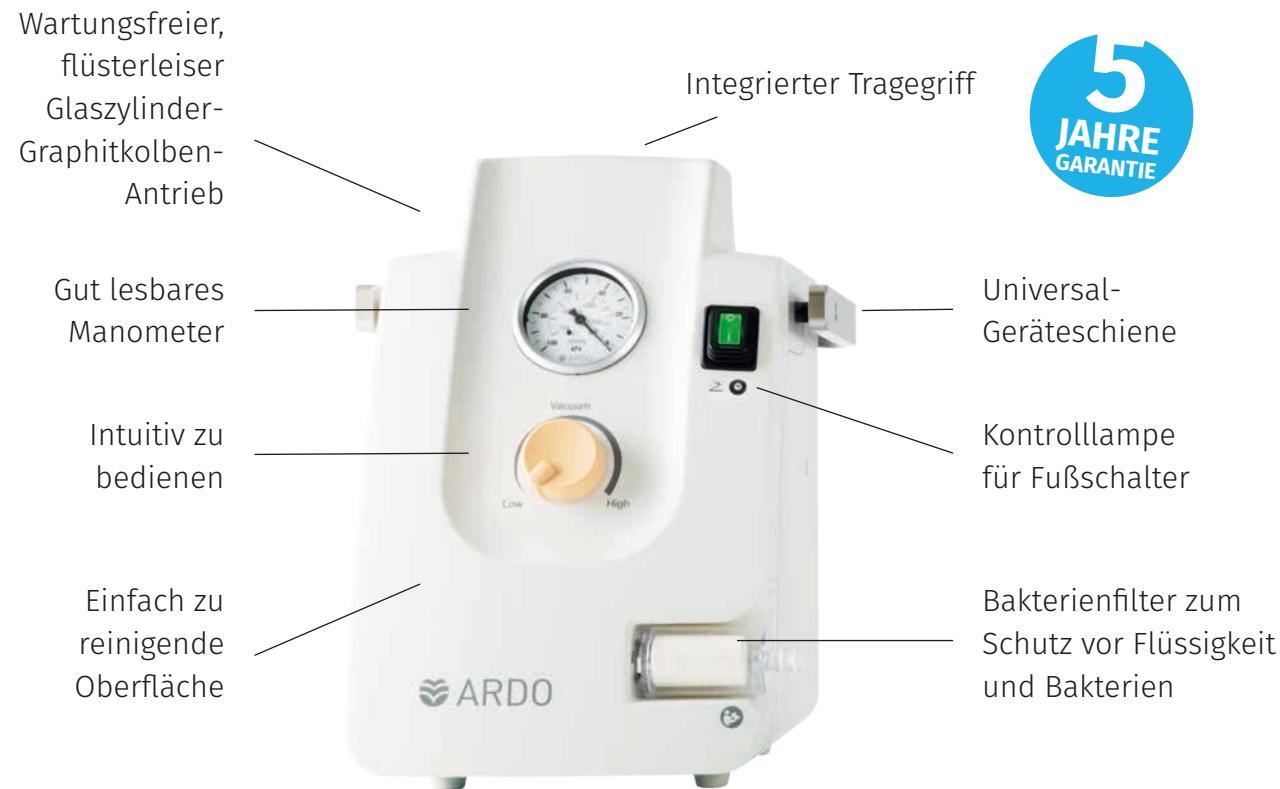

Kompromisslose Funktionalität:

Schneller Vakuumaufbau, konstante Saugleistung und Langlebigkeit durch das geräuscharme und wartungsfreie Glaszylinder-Graphitkolben-System, einfache Bedienbarkeit und gut lesbares Manometer.

Hygienische Sicherheit

Der hydrophobe Bakterienfilter schützt die Pumpe vor Kontamination sowie vor dem Eindringen von Flüssigkeit. Das Gehäuse der Vakuumpumpen lässt sich einfach reinigen und mit den gängigen Mitteln desinfizieren.

Hohe Flexibilität:

Der integrierte Tragegriff und die Geräteschiene sorgen für Mobilität. Zubehör wie das Rollgestell mit zusätzlicher Geräteschiene oder die Pumpenhalterung zur Montage am Turm ermöglichen den flexiblen Einsatz im OP und auf Station.

Schweizer Präzision mit Garantie:

Wir verwenden ausschließlich hochwertige Komponenten und fertigen die Vakuumpumpen in Präzisionsarbeit in der Schweiz. Darauf geben wir Ihnen 5 Jahre Garantie.

Breites Spektrum an Anwendungen

Unsere medizinischen Absaugpumpen eignen sich für ein breites Spektrum an Anwendungen und Einsatzbereichen. Der Unterschied zwischen ARDO Master und ARDO Senator liegt in ihrer Saugleistung von 50 l/min des Masters und 30 l/min des Senators. Entsprechend unterscheiden sich ihre Einsatzschwerpunkte in der Praxis:



ARDO Master: Saugleistung **50 l/min**
Vakuum bis 95 kPa / 713 mmHg

Indikations-Beispiele Master:

- Chirurgie
- Orthopädie
- Liposuktion
- Zahn- / Kieferchirurgie
- Veterinärmedizin
- Sekretabsaugung allgemein

„In heiklen Situationen müssen die Geräte im OP so zuverlässig und präzise wie möglich sein – die Master Absaugpumpe erfüllt perfekt unsere hohen Ansprüche.“

Thomas Greshacke, Ltg. Medizintechnik
Herz-Jesu Krankenhaus, Münster-Hiltrup



ARDO Senator: Saugleistung: **30 l/min**
Vakuum bis 95 kPa / 713 mmHg

Indikations-Beispiele Senator:

- Endoskopie
- Gynäkologie und Vakuumextraktion
- Hals-Nasen-Ohren
- Notfallabsaugung
- Sekretabsaugung allgemein

„Weil in meiner Praxis die Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit auch in hektischen Situationen jederzeit gewährleistet sein müssen, habe ich mich für die Senator Absaugpumpe entschieden.“

Dr. med. Andrea-Carlo Pesarini,
Gastroenterologie München

Der ARDO Chirurgiesauger auf einen Blick

Produktbeschreibung:

- Schneller Vakuumaufbau bis 95kPa
- Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Fein justierbare, stufenlose Saugstärkenregelung
- Verschleiß- und wartungsfreies Glaszylinder-Kolben-System
- Geräteschiene am Gerät und sowie am Rollgestell
- Integrierter Tragegriff am Gehäuse
- Großes, gut lesbares Manometer

Kontraindikationen:

- Kardiochirurgie
- Betrieb mit niedrigem, präzisiertem Vakuum, z.B. Thorax-Drainage
- Verwendung im Freien, in Transportmitteln, im häuslichen Gebrauch



ARDO Chirurgiesauger mit Rollgestell und Fuß-Ein-/Aus-Schalter“ (Rollgestell separat s. S. 11)

ARDO Master - Saugleistung 50 l/min

30.00.39 **ARDO Master Chirurgiesauger weiß**

30.00.40 **ARDO Master Chirurgiesauger weiß mit Fußschalter**

ARDO Senator - Saugleistung 30 l/min

31.00.40 **ARDO Senator Chirurgiesauger weiß**

31.00.41 **ARDO Senator Chirurgiesauger weiß mit Fußschalter**

Lieferumfang:

- Vakuumpumpe mit integriertem Tragegriff und Geräteschiene
- Vakuumschlauch 50 cm aus Silikon inkl. 2 Winkelsteckkupplungen
- Fuß-Ein-/Aus-Schalter (nur bei 30.00.40 und 31.00.41)
- Gebrauchsanleitung
- 11 Bakterienfilter, Reichweite ca. 1 Jahr



Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230V
- Saugleistung: Senator 30 l/min / Master 50 l/min
- Max. Vakuum: 95 kPa (713 mmHg)
- Gewicht ohne Fahrgestell: 7,4 kg

Hydrophober Bakterienfilter für ARDO Master und Senator Chirurgiesauger

Zum Schutz vor Überlauf und Kontamination

Der Bakterienfilter ist ein essentielles Zubehör für Ihre Absauggeräte von ARDO. Er schützt Ihre Pumpe vor Kontamination durch Bakterien (Filtereffizienz: 99,99946%) und verhindert durch seine hydrophoben Eigenschaften das Eindringen von Flüssigkeit und Schaum.



Hinweise zum Filterwechsel:

Zum Erhalt der vollen Saugleistung sowie zum Schutz Ihrer Pumpe muss der Filter monatlich gewechselt werden. Bei sehr starker Nutzung ggf. früher. Nutzen Sie die vorhandene Fläche auf dem Filter zum Eintragen des Wechseldatums. Der regelmäßige Filterwechsel ist Voraussetzung für Ihre 5-Jahres-Garantie auf Ihren ARDO Chirurgiesauger.

So einfach testen Sie den Filter:

- Schlauch vom Filter entfernen
- Vakuum-Regler auf Maximum stellen
- Pumpe einschalten
- Bei laufendem Gerät mit der Einstellung auf maximales Vakuum und bei offenem Vakuuman-schluss am hydrophoben Bakterienfilter soll das Vakuummeter nicht mehr als -20kPa (-150mmHg) anzeigen, sonst hydrophoben Bakterienfilter ersetzen.

In folgenden Fällen ist ein frühzeitiger Filterwechsel notwendig:

- Es ist Flüssigkeit in den Filter eingedrungen
- Die Saugleistung der Pumpe ist vermindert

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Zubehör für ARDO Master und Senator Chirurgiesauger

50.00.05 Hydrophober Bakterienfilter (VE 10 Stk.)

- Schutz der Pumpe vor Flüssigkeit und Kontamination
- Verbrauchsartikel, monatlich zu wechseln



50.00.170 Rollgestell mit Geräteschiene

- Maße (LxBxH): ca. 560 x 450 x 660 mm
- Gewicht: ca. 10,7 kg
- 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen antistatisch mit Bremse
- Unterfahrhöhe ca. 125 mm



50.00.130 Pumpenhalterung zur Montage am Geräteturm

- Maße (LxBxH): ca. 290 x 170 x 85 mm
- Material: Aluminium, farblos eloxiert



50.00.245 Fuß-Ein-/Aus-Schalter zur freihändigen Bedienung

- Ersatzteil für Vakuumpumpen mit Fußschalter:
30.00.40, 31.00.41, 30.00.36, 31.00.37
- Anschlusslänge: 200 cm



50.00.246 Halterung für Fuß-Ein-/Aus-Schalter

- Praktische Verstaumöglichkeit zum Transport
- Maße (LxBxT): ca. 103 x 113 x 68 mm
- Material: Chromstahl




Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------------	-------------

Zubehör für ARDO Master und Senator Chirurgiesauger

50.00.57 Instrumentenablage für Geräteschiene

- Maße (LxBxH): ca. 243 x 180 x 27 mm
- Material: Chromnickelstahl 18/10

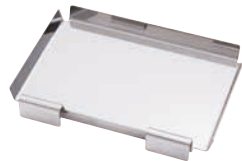

50.00.07 Fußvakuumregler zur freihändigen Bedienung

- Für alle ARDO Chirurgiesauger geeignet
- Hilfreich vor allem zur Vakuumextraktion
- Anschlusslänge: 200 cm



50.00.63 Pedalhalter für Fußvakuumregler am Rollgestell

- Maße (LxBxH): ca. 130 x 20 x 63 mm
- Material: Kunststoff (Polyethylen weiß)



Umschaltventil inkl. 3 Verbindungsschläuchen

- Zur Verbindung von zwei Sekretflaschen/-behältern mit der Vakuumquelle, inkl. Halterung für Normschiene
- Aus hochwertigem Aluminium, eloxiert
- enthält 1x 40 cm und 2x 50 cm Vakuumschlauch mit passenden Verbindungsstücken für den jeweiligen Einsatz



50.00.99 Umschaltventil – Einsatz mit ARDO Mehrweg-Sekretflaschen

50.00.99_V2 Umschaltventil – Einsatz mit VacSax® 2 Liter Sekretbehältern

50.00.99_V3 Umschaltventil – Einsatz mit VacSax® 3 Liter Sekretbehältern

Gerne beraten wir Sie zu den verschiedenen Varianten.

50.00.97 Schlauchhalter für Normschiene

- Halterung für Absaugschlauch
- zum Anbringen an Normschiene



Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------------	-------------

Zubehör zur Vakuumentbindung

Für den Einsatz in der Geburtshilfe empfehlen wir den ARDO Senator sowie die Verwendung der weichen Silc Cup Silikon-Saugglocken. Damit Sie mit beiden Händen arbeiten können ist der Fußvakuumregler ein unverzichtbares Zubehör.

Mehrweg-Saugglocken zur Vakuumextraktion

Die weichen Saugglocken haften sanft am Kopf des Fötus. Das einteilige Design erleichtert die Handhabung, die glatte Oberfläche mit einer Längsrille ermöglicht Drehungen. Silc Cup Saugglocken sind autoklavierbar und für zwei Jahre bzw. 30 Autoklavenzyklen einsetzbar, je nachdem was schneller eintritt.

- Material: Silikon medizinischer Güte
- Inkl. Silikonschlauch 150 cm
- Inkl. Winkelsteckkupplung 50.00.86 für Patientenanschluss an der ARDO Mehrweg-Sekretflasche



50.00.80 Silc Cup Saugglocke gelb Ø 60 mm

50.00.81 Silc Cup Saugglocke blau Ø 50 mm



Beispiel für Applikations-Set Vakuumextraktion



Flüssigkeits- management

Welches Auffangsystem ist das Richtige?

Einweg oder Mehrweg – Das ist die Frage, die Sie sich nicht nur aus Sicht der Hygiene und der Arbeitssicherheit stellen sollten, denn tatsächlich sparen Sie mit einem Einwegsystem wertvolle Arbeitszeit und unter dem Strich meist auch Kosten.

Welche Lösung für Ihre Praxis oder Station die richtige ist können Sie nur selbst entscheiden. Folgende Parameter sollten Sie dabei berücksichtigen:


Mehrweg

Kosten & Effizienz



- Kosten für vorgeschriebene Schutzausrüstung der Mitarbeiter
- Zeitaufwand für manuelle Reinigung und Desinfektion oder Kosten für Reinigungs- und Desinfektionsgerät
- Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Arbeitsschutz & Infektionsschutz

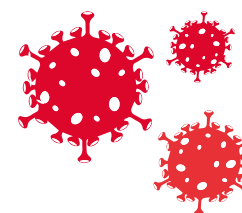

- Infektionsrisiko bei Leerung durch Spritzer und Aerosole
- Aufbereitungseinheit, spezielles Ausgussbecken und Schutzausrüstung sind vorgeschrieben
- Arbeitgeber sind verpflichtet eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben

Sicherheit und Benutzer- freundlichkeit



- Fehleranfälligkeit durch falsches Zusammensetzen der gereinigten Komponenten
- Risiko der Patientengefährdung oder der Kontamination des Absauggeräts durch Fehlbedienung
- Unangenehme Gerüche und Anblicke bei Entleerung und Reinigung

Einweg

- Schneller und einfacher Behälterwechsel
- Sehr geringer Arbeitsaufwand
- Schnelle und hygienische Entsorgung
- Gut kalkulierbare Kosten für Einwegbehälter

- Geschlossenes System, kein Kontakt mit Sekreten
- Entsorgung nach AS 18 01 04 mit Siedlungsabfällen möglich
- Zusätzliche Auslauf-Sicherheit bei Nutzung von Geliermittel


- Hydrophober Bakterienfilter am Vakuumanschluss zum Überlaufschutz und Schutz des Absauggeräts vor Kontamination
- Hoher Patientenschutz, da Fehlbedienung nicht möglich

VacSax® Einweg-Auffangsystem

Das Sekret-Auffangsystem von VacSax® bietet ein innovatives Produktangebot für ein sicheres und hygienisches Flüssigkeitsmanagement. Es ist **kompatibel mit allen chirurgischen Absaugpumpen sowie Zentralabsaugungen** im Markt und bietet Ihnen höchste Sicherheit.

Das Besondere an VacSax®:

Nur das Einweg-Auffangsystem von VacSax® verfügt über die patentierte BactiClear®-Technologie: Alle Oberflächen der Kanister und der Sekretbehälter inklusive deren Deckeln sind mit Silberionen behandelt, wodurch nachweislich* **mehr als 99,99 %** der Bakterien abgetötet werden. Damit erhöhen Sie Ihren Infektionsschutz und senken das Risiko einer Kreuzkontamination.

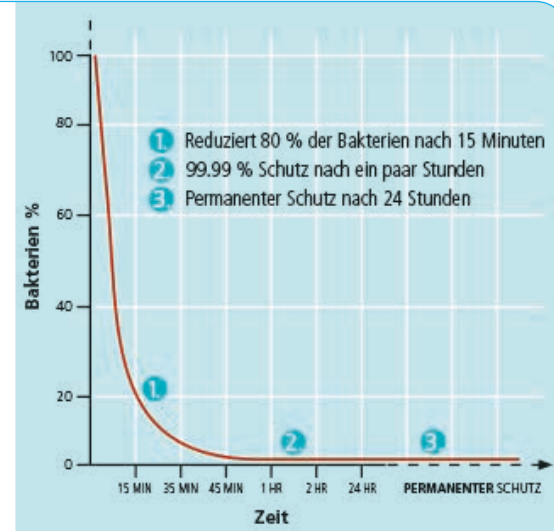

Gründe für VacSax®-Produkte:

Sicher & hygienisch:

- Geschlossenes System mit Überlaufschutz und Bakterienfilter
- Extrem stabile und reißfeste Sekretbehälter, selbst bei Sturz oder Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen
- Patientensicherheit durch unverwechselbare Anschlüsse
- Auslaufsichere Entsorgung durch Verschluss für Patientenöffnung



Einfach & praktisch:

- Einfaches Einsetzen der halbstarren Einweg-Behälter in die Kanister
- Sekretbehälter können abgestellt und stehend gelagert werden
- Lieferung in kompakter Form, automatisches Entfalten im Vakuum
- Gut lesbare Messskala auf den transparenten Kanistern

Flexibel einsetzbar:

- Kompatibel mit den gängigen Chirurgesaugern und Absaugsystemen
- Erhältlich mit 1L, 2L und 3 Liter Behältervolumen
- Mit integriertem sowie separatem Geliergranulat verfügbar
- Verwendbar mit allen Ø 7 mm Schläuchen



Artikel-Nr.

Bezeichnung

VacSax® Einweg-Auffangsystem

VacSax® Kanister für Einweg-Sekretbehälter

- Mehrweg-Kanister für die Verwendung von VacSax® Einweg-Sekretbehältern
- Aus stabilem Polycarbonat
- Mit gut lesbarer Mengenskala
- BactiClear® mit antimikrobieller Oberfläche
- Sterilisierbar im Autoklaven bei 121°C sowie mit Desinfektionsmitteln auf Wasser-Basis



50.00.103 1 Liter Mehrweg-Kanister für Einweg-Behälter

50.00.104 2 Liter Mehrweg-Kanister für Einweg-Behälter

50.00.187 3 Liter Mehrweg-Kanister für Einweg-Behälter

50.00.106 Universalhalter mit Schienenklemme
• Zum Anbringen der Kanister an Normschienen
• Material: Metall



VacSax® Einweg-Sekretbehälter

- Einweg-Behälter zum Auffangen des abgesaugten Sekrets
- Höchste Sicherheit sowie einfach und praktisch anzuwenden
- Stabile, reißfeste und selbststehende Behälter aus Polyethylen
- Mit hydrophobem Bakterienfilter als Überlaufschutz
- BactiClear® mit antimikrobieller Oberfläche
- Unverwechselbare Anschlüsse für Patienten- und Vakuumschlauch
- Lieferung in kompakter Form, automatisches Entfalten im Vakuum



50.00.100 1 Liter Einweg-Sekretbehälter (VE 30 Stk.)

50.00.117 2 Liter Einweg-Sekretbehälter (VE 30 Stk.)

50.00.180 3 Liter Einweg-Sekretbehälter (VE 20 Stk.)

50.00.101 1 Liter Einweg-Sekretbehälter mit Geliergranulat (VE 25 Stk.)

50.00.118 2 Liter Einweg-Sekretbehälter mit Geliergranulat (VE 30 Stk.)

50.00.181 3 Liter Einweg-Sekretbehälter mit Geliergranulat (VE 20 Stk.)

Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------------	-------------

Zubehör für VacSax® – Wiederverwendbare Schläuche

**50.00.114 Mehrweg-Vakuumschlauch für 1L und 2L VacSax®
Einweg-Sekretbehälter**

- Größe: Ø 7/13 mm
- Länge: 50 cm
- Silikon, sterilisierbar
- Mit 2 Steckkupplungen (50.00.235 und 50.00.61)



**50.00.192 Mehrweg-Vakuumschlauch-Set für 3L VacSax®
Einweg-Sekretbehälter**

- Größe: Ø 7/13 mm
- Länge: 100 cm mit T-Stück
- Silikon, sterilisierbar
- Inkl. 2 Steckkupplungen (50.00.235 und 50.00.61)



**50.00.03 Mehrweg-Patientenschlauch für VacSax®
Einweg-Sekretbehälter**

- Größe: Ø 7/13 mm
- Länge: 170 cm
- Silikon, sterilisierbar
- Direkt an Sekretbehälter anschließbar



**50.00.47 Silikonschlauch, transparent, Ø 7/13 mm,
sterilisierbar, per Meter**



**50.00.46 Silikonschlauch, transparent, Ø 10/18 mm,
sterilisierbar, per Meter**



Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------------	-------------

Zubehör für VacSax® – Einweg-Schläuche

**50.00.240 Einweg-Vakuumschlauch für 1L und 2L VacSax®
Einweg-Sekretbehälter**

- Größe: Ø 7/13 mm
- Länge: 100 cm
- PVC, unsteril
- Mit 2 Kupplungsstücken (50.00.235 und 50.00.61)



**50.00.239 Einweg-Vakuumschlauch-Set für 3L VacSax®
Einweg-Sekretbehälter**

- Größe: Ø 7/13 mm
- Länge: 1x 100 cm, 1x 50 cm
- PCV, unsteril
- Mit T-Stück und 2 Kupplungsstücken (50.00.235 und 50.00.61)



**50.00.241 Einweg-Patientenschlauch 170 cm für VacSax®
Einweg-Sekretbehälter**

- Größe: Ø 7/13 mm
- PVC, unsteril
- Direkt ansteckbar auf Sekretbehälter



**50.00.242 Einweg-Patientenschlauch per Meter für VacSax®
Einweg-Sekretbehälter**

- Größe: Ø 7/13 mm
- PVC, unsteril
- Direkt ansteckbar auf Sekretbehälter



Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------------	-------------

Zubehör für VacSax® Einweg-Auffangsystem

- 50.00.106

Universalhalter mit Schienenklemme

 - Zum Anbringen von Kanistern an Normschienen
 - Material: Metall



- 50.00.235

Einweg-Steckkupplung, schwarz

 - Antimikrobiell
 - Zur Verbindung des Vakuumschlauchs mit VacSax®-Sekretbehältern



- 50.00.61

Mehrweg-Kupplungsstück, transparent

 - Zum Anschluss des Vakuumschlauchs an die Vakuumpumpe



- 50.00.145

Einweg-Schlauchadapter, weiß (VE 30 Stk.)

 - Adapter zur Verbindung von Schläuchen Ø 8 bis 14 mm an den Patientenanschluss des Einweg-Sekretbehälters



- 50.00.97

Schlauchhalter für Normschiene

 - Halterung für Absaugschlauch
 - Zum Anbringen an Normschiene



Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------------	-------------

Zubehör für VacSax® Einweg-Auffangsystem

- 50.00.113

VacSax® Geliergranulat (VE 20 Stk.)

 - Zum Verfestigen von Flüssigabfällen
 - Flasche à 72 g
 - Bindet bis zu 3 Liter



- 50.00.188

VacSax® Gewebe-Auffangbehälter (VE 12 Stk.)

 - Zum Auffangen von Gewebeproben
 - Einfache Befestigung am Sekretbehälter
 - Inkl. Einweg-Verbindungsschlauch 35 cm



- 50.00.234

High Flow Viren- und Bakterienfilter (VE 10 Stk.)

 - Zum Schutz der Vakuumquelle vor einer Kontaminierung
 - Filtriert 99,99998% der Viren und Bakterien gemäß ASTM F2101-07
 - Für Schläuche Ø 7 mm
 - Nach 30 Tagen oder bei Widerstandserhöhung zu ersetzen



Hinweis zu COVID-19: Laut Hersteller GVS hat eine Vielzahl an Berichten gezeigt, dass die HMEF- und HEPA-Filter von GVS eine komplette Barriere gegenüber kontaminierter Körperflüssigkeit darstellen; sie wurden außerdem für die Entfernung einer Reihe an klinisch relevanten Bakterien und Viren validiert, einschließlich Influenza-A-Virus (H1N1: 0,08-0,12 µm), HIV (0,08 µm), Hepatitis-C-Virus (0,8 µm), Adenovirus (0,07 µm), Cytomegalovirus (0,1 µm), Orthomyxovirus (0,12 µm) und Mycobacterium tuberculosis (1,0 µm). COVID-2019, MERS-CoV und SARS-CoV sind Coronaviren einer Größenordnung von 0,06 bis 0,2 µm. Daher ist GVS der Ansicht, dass deren Filter aller Wahrscheinlichkeit nach auch gegenüber diesen Viren effizient sind.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------------	-------------

Mehrweg-Auffangsystem

Mehrweg-Sekretflaschen von ARDO

- Mehrweg-Behälter zum Auffangen des abgesaugten Sekrets
- Aus widerstandfähigem, langlebigem Polysulfon
- Schnell und einfach zusammenzubauen
- Transparent, mit geprägter Skalierung
- Sterilisierbar im Autoklaven bis max. 134°C für max. 15 min, in Dampf bei max. Dauertemperatur 140°C und max. 150°C in trockener Wärme sowie mit Desinfektionsmitteln auf Aldehyd-Basis



50.00.167 1 Liter Sekretflasche

50.00.168 2 Liter Sekretflasche

50.00.169 5 Liter Sekretflasche

Flaschendeckel für Mehrweg-Sekretflaschen

- Für alle ARDO Sekretflaschen (1L, 2L und 5L)
- Absolut dichter Verschluss mit Überlaufsicherung
- Mit Griff und Schnelkkupplung für alle Geräteschienen
- Sterilisierbar im Autoklaven bis max. 134°C für max. 15 Min., in Dampf bei max. Dauertemperatur 140°C und max. 150°C in trockener Wärme, sowie mit Desinfektionsmitteln auf Aldehyd-Basis



50.00.08 Flaschendeckel für Ø 7/13 mm Patientenschlauch

50.00.10 Flaschendeckel für Ø 10/18 mm Patientenschlauch

Ersatzteile für Flaschendeckel

50.00.83 Halter für Schwimmer der Überlaufsicherung

50.00.84 Schwimmer der Überlaufsicherung

99.00.544 Dichtungsring für Flaschendeckel



Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------------	-------------

Zubehör für Mehrweg-Auffangsystem

50.00.85 Winkelsteckkupplung Ø 8 mm grün

- Für Vakuumanschluss am Flaschendeckel
- Für Ø 7 mm Vakuumschlauch



50.00.86 Winkelsteckkupplung transparent Ø 8 mm

- Für Patientenanschluss am Flaschendeckel
- Für Ø 7 mm Patientenschlauch



50.00.87 Winkelsteckkupplung transparent Ø 13 mm

- Für Patientenanschluss am Flaschendeckel
- Für Ø 10 mm Patientenschlauch



50.00.01 Vakuumschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 7/13 mm, 50 cm

- Vakuumschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 7/13 mm, 50 cm
- Silikon, sterilisierbar
- Inkl. 2 Winkelsteckkupplungen grün 50.00.85, transparent 50.00.86



50.00.02 Patientenschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 7/13 mm, 170 cm

- Silikon, sterilisierbar
- Inkl. 1 Winkelsteckkupplung transparent 50.00.86



50.00.04 Patientenschlauch für Mehrweg-Sekretflaschen, Ø 10/18 mm, 170 cm

- Silikon, sterilisierbar
- Inkl. 1 Winkelsteckkupplung transparent 50.00.87



50.00.47 Silikonschlauch, Ø 7/13 mm, sterilisierbar, per Meter

50.00.46 Silikonschlauch, Ø 10/18 mm, sterilisierbar, per Meter

50.00.03 Silikonschlauch, Ø 7/13 mm, sterilisierbar, 170 cm



SOLARDO eco – Low-Level-Lasertherapie (LLLT)

Für eine schmerzfreie Behandlung zur schnelleren Wundheilung

Behandlungen ohne Nebenwirkungen:

- ✓ Stärkere Zellproliferation
- ✓ Analgetische Wirkung
- ✓ Antiinflammatorischer Effekt
- ✓ Antiödematöse Wirkung
- ✓ Beschleunigung der Wundheilung
- ✓ Durchblutungsförderung
- ✓ Verminderung des Infektionsrisikos

Gründe für den SOLARDO eco Laser:

- ✓ Sofort einsetzbar, keine Meldepflichten
- ✓ Integrierter Timer mit 6 wählbaren Therapiezeiten
- ✓ Komfortables Arbeiten, kein ständiger Tastendruck erforderlich
- ✓ Für Flächen- und Punktbestrahlung
- ✓ CE-zertifiziertes Medizinprodukt

Einsatzbereiche LLLT allgemein:

- ✓ Gynäkologie und Geburtshilfe
- ✓ Kinderheilkunde
- ✓ Dermatologie und HNO
- ✓ Orthopädie und Sportmedizin
- ✓ Chirurgie
- ✓ Zahnheilkunde
- ✓ Veterinärmedizin



SOLARDO Laser – sofort einsetzbar:

Schutzbestimmungen und Meldepflichten	Wettbewerber Laser (Laserklasse 3B)	SOLARDO eco Laser (Laserklasse 2M)
Laserchutzbeauftragten Ausbildung	vorgeschrieben	nicht vorgeschrieben
Laserschutzbrillen	vorgeschrieben	nicht vorgeschrieben
Laseranmeldung bei der Berufsgenossenschaft	notwendig	nicht notwendig
Gefahrenabschätzung vor Inbetriebnahme	erforderlich	nicht erforderlich



Gerne beraten wir Sie unverbindlich: 08153 / 90 877 0

Ihr Kontakt zu uns:

Ardo medical GmbH
Argelsrieder Feld 10
82234 Oberpfaffenhofen
Deutschland

T +49 (0) 8153 90 877 0
F +49 (0) 8153 90 877 66
info@ardo.de
www.ardo.de

 **ARDO**
Hospital Recommended